

ORTHOPEDICS  
NEUROSURGERY



# FRABONE<sup>®</sup>-H

BCP(biphasic calcium phosphate) 다공성 과립에  
히알루론산(hyaluronic acid)이 첨가된 합성골 이식재 입니다.

※ 바이러스 감염 및 면역거부 반응으로 부터 안전합니다.


## 디자인 컨셉



INTERNATIONAL PATENT

PCT / KR2011 / 05509-USA, Germany

## 주문정보

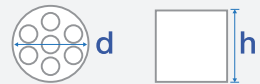

포장형태	모델명	단위(cc)	과립크기 d x h(mm)	급여가격	보험코드	
	OGFBT	070500	5.0	0.7 x 0.7	249,830 원	C0510242
		071000	10.0	0.7 x 0.7	411,000 원	C0510342
	OGFBT	300500	5.0	3.0 x 2.0	249,830 원	C0510242
		301000	10.0	3.0 x 2.0	411,000 원	C0510342
		302000	20.0	3.0 x 2.0	611,000 원	C0510442
		303000	30.0	3.0 x 2.0	687,570 원	C0510942
		303500	35.0	3.0 x 2.0	922,080 원	<22년 7월 1일 고시예정>

☉ 사용방법

01



제품을 열기 전, 부착된 라벨의  
내용이 알맞는지 확인한다.

02



포장지를 천천히 개봉한다.

03



0.5ml/g의 생리 식염수에  
5초간 수화 후 덩어리 형태로  
제어하여 10분간 유지한다.

04



수화 후 젤화된 과립을  
적용부위에 이식한다.

※ 과하게 사용된 생리 식염수는 멸균된 거즈로 바로 제거한다.